

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ЛИЦА

Описание инструментов
и правила пользования



ПЕТЛЯ ВИДАЛЯ



ЛОКА УНО

ИГЛА ВИДАЛЯ

ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты изготовлены из медицинской стали. Их можно и нужно дезинфицировать перед каждым применением.

Первый этап — дезинфекция.

Сразу после покупки инструменты нужно дезинфицировать одним из доступных домашних способов. Ее можно прокипятить в течение полчаса или положить на тот же промежуток времени в пароварку или в мультиварку с режимом «Пар».

Также можно положить инструменты на фольгу и убрать в духовку, разогретую до 200 градусов, на полчаса. Если в твоем арсенале имеется специальный стерилизатор, можно воспользоваться им.

Непосредственно перед использованием на полчаса кладут в раствор этилового спирта. Альтернативными растворами могут служить Хлоргексидин или Мирамистин.



Непосредственно после использования инструмент протирают спиртовой салфеткой для удаления видимых загрязнений, а затем кладут в 3%-ный раствор перекиси водорода.

Этапы проведения механической чистки

Учитывайте, что чистка займет достаточно много времени, а после нее лицо будет выглядеть не лучшим образом. Планируйте процедуру на выходной день, чтобы сделать ее не спеша и основательно. Основные этапы будут следующие:

- предварительное очищение и пилинг;
- распаривание;
- чистка лица инструментами;
- дезинфекция и уход за кожей.

ПОДГОТОВКА ЛИЦА К ГЛУБОКОМУ ОЧИЩЕНИЮ

Целая куча всякой гадости сидит в глубине эпидермиса. Но полностью извлечь ее через закрытые поры невозможно, так что на этом этапе ваша задача состоит в том, чтобы максимально раскрыть эти микроскопические отверстия. Предварительно нужно очистить кожу, чтобы не занести внутрь загрязнения.

1. Снимите макияж при помощи специальных средств. Хорошенько умойтесь, используя антибактериальный гель, пенку, или простое, но проверенное дегтярное мыло.
2. Нанесите на влажное очищенное лицо скраб, и прогладьте по массажным линиям. Пилинг необходим для удаления отмерших клеток эпидермиса, которые закупоривают поры.
3. Распарьте лицо, наклонившись над миской с горячей водой или травяным отваром. Накройтесь с головой полотенцем и распаривайте кожу 10 минут. Альтернативой паровой ванночки для лица может стать горячая, полная пара ванна или специальный аппарат – вапоризатор.

Тем, кто категорически не переносит высокую влажность воздуха, раскрыть поры поможет горячий влажный компресс. Смочите небольшое полотенце в горячей воде, отожмите и положите на лицо. Повторно окунайте его в воду по мере остывания. Косметологические бренды предлагают разогревающие маски для раскрытия пор, но для чувствительной кожи они могут не подойти.


Теперь кожа готова к глубокой и прицельной работе. Усаживайтесь перед зеркалом и позаботьтесь о качественном освещении, позволяющем видеть малейшие дефекты. Расслабьтесь, чтобы сосуды дермы не сужались и разогрев сохранялся в процессе работы.



1. Достаньте инструменты из дезинфицирующего раствора, вытрите их насухо. Подготовьте ватный диск или тканевую салфетку смоченную в спирте, чтобы вытирать ложку по ходу работы. Также вам пригодятся ватные палочки для точечной обработки.
2. Если на лице есть закрытые комедоны, кожу над ними лучше проколоть, чтобы не потребовалось сильно давить на образования. Здесь вам пригодится игла Видаля или косметологическое копье. Растяните кожу пальцами и проткните ее острием. Будьте осторожны, инструмент должен преодолеть всего пару миллиметров.



3. Приложите ложку таким образом, чтобы отверстие находилось четко над центром комедона или прыщика. Плавно нажмите на инструмент, выдавливая стержень образования. У открытых комедонов сальная пробка густая, а в папулах содержимое будет более жидким.
4. Ватную палочку окуните в Хлоргекисдин или 70% спирт и приложите к точке, из которой только что выдавили содержимое. Ложку вытрите о салфетку и переходите к следующему образованию. Работайте до тех пор, пока не выдавите все видимые элементы сыпи.
5. Если ваша ложка Уно для чистки имеет насадку-шумовку, самое время почистить поры. Прогладьте лицо ложечкой Уно, двигаясь от переносицы к кончику носа, от спинки к крыльям носа, от носа к щекам, от центра лба к вискам. По задумке изготовителя, кожное сало должно выходить сквозь дырочку и накапливаться в ложке, но к процессу придется приноровиться.

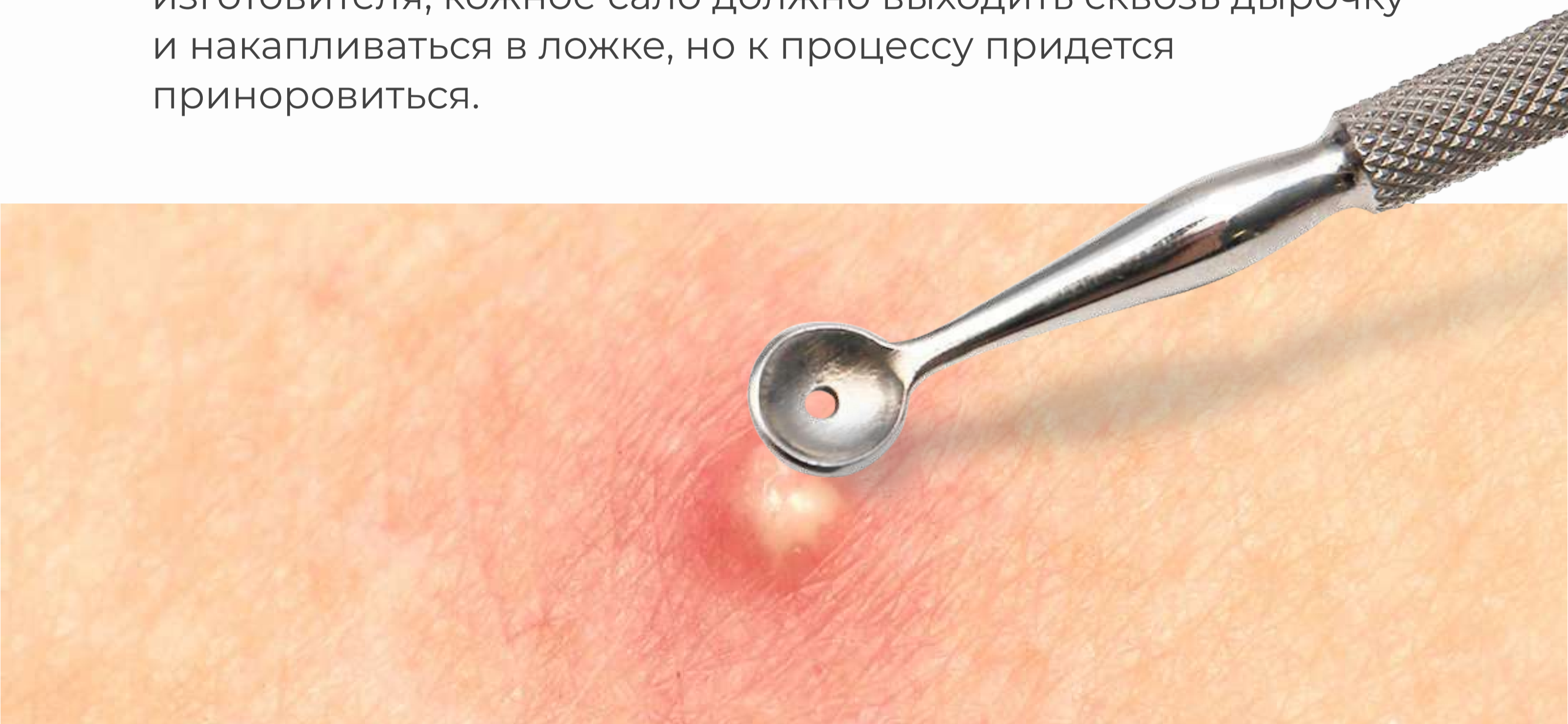

На этом работа с ложкой окончена, в отличие от чистки. Чистые и красивые поры широко открыты, и готовы впитать в себя любую грязь и бактерии, которые только попадут на кожу. Так что теперь их нужно сузить, и желательно снять раздражение с кожи, чтобы краснота сошла как можно быстрее.

Завершающим аккордом качественной чистки станут такие действия:

- Протрите лицо ватным диском, смоченным в хлоргесидине.
- Нанесите успокаивающую маску из белой глины и полежите 10-15 минут. Смойте глину.
- Ополосните лицо холодной водой, чтобы сузить поры. Еще лучше будет, если вы протрете кожу кубиком льда, приготовленного из отвара ромашки или календулы.



0,05 % р-ра



Имейте в виду, что процедура механической чистки довольно травматична для лица, так что проводить ее чаще, чем раз в 1-1,5 месяца не рекомендуется. В промежутке используйте ложку для выдавливания отдельных прыщей или комедонов, соблюдая все правила антисептики.

ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ



Копье



игла Видаля



ложка Уно



изогнутая игла

петля Видаля



ложка Уно



петля Видаля



петля Видаля



ЛОЖКА УНО

Придерживайтесь следующей инструкции по применению лопатки Уно:

1. Очистка лица. Воспользуйтесь скрабом, сделайте пилинг, чтобы упростить процесс.
2. Откройте поры. Распарьте кожу при помощи пара или горячего полотенца. Лучше использовать отвар лечебных трав для этих целей. Продолжительность этого этапа – 10-20 минут.
3. Кожу вытрите насухо.
4. Косметологическую ложку протрите спиртом, затем любым дезинфицирующим средством.
5. Смочите ватку в обеззараживающем средстве, протрите им лицо (настойка календулы, спирт).
6. Водите ложкой по массажным линиям. Начните от бровей по направлению к линии роста волос, затем проведите от носа к его крыльям, а от них к щекам. Последним обработайте подбородок, ведя от середины к области висков.
7. Регулярно удаляйте с ложки содержимое пор.

ПЕТЛЯ ВИДАЛЯ

В каких случаях надо прибегать к использованию петли:

Предназначена для удаления загрязнения из пор. Это могут быть как неглубокие угри, так и глубоко залегающие камедоны. Сальные железы человека работают день и ночь, чтобы кожа оставалась упругой и мягкой. При нормальном типе кожи вырабатываемый жир равномерно распределяется по лицу и не забивает поры, если же есть какие-то нарушения в этом процессе, кожного сала вырабатывается в излишке, оно остается в порах и впоследствии окисляется, образуя черную точку. При попадании в благоприятную среду кожного жира, бактерии приводят к воспалению, которое в народе именуется прыщом.

Прежде всего необходимо очистить лицо от поверхностных загрязнений с помощью простого мыла или средств для демакияжа. Расширение пор – обязательное условие для использования петли. Только так можно добиться полного выхода содержимого пор без дополнительного травмирования кожи. Нужно расположить прибор так, чтобы черная точка или прыщ находились по центру петли. Надавите на петлю таким образом, чтобы не причинить боль, но добиться выхода содержимого поры. Если после надавливания пора не очистилась, следует повторить распаривание или использовать другой косметологический прибор.

Сама чистка петлёй выглядит так:

1. Дезинфицируем кожу. Для этого подойдет спиртовой раствор или лосьон на спирту;
2. Обрабатываем петельку дезинфектором;
3. Прикладываем петлю к кожному покрову так, чтобы угорь или прыщ оказались посередине ушка;
4. Слегка надавливаем и ждем, когда прыщ выйдет наружу. Если одного надавливания недостаточно, снова повторяем;
5. Повторно дезинфицируем инструмент, повторяем то же самое на других проблемных участках.

ВАЖНО!

Во время сеанса внутри ушка скапливается грязь, подкожное сало и удаленные прыщи, поэтому прибор необходимо постоянно обрабатывать дезинфицирующим средством. Если пренебрегать данным правилом, можно занести заражение и усугубить проблему.

ИГЛА ВИДАЛЯ

На вид грозный, но довольно безобидный инструмент для механической чистки. Применяют его для прыщей, расположенных глубоко в коже, а также для мелких белых прыщей.

Использовать иглу можно также после распаривания кожного покрова, поскольку это даст возможность меньше травмировать ткани и быстрее избавиться от воспаления, благодаря приливу крови к коже. Копье – наконечник в виде заостренного трехгранника, который используется так же, как игла.

Инструмент игла Видаля представляет собой рукоять с острым стальным наконечником. Предназначается для удаления прыщей. Как пользоваться иглой:

1. Очищаем и дезинфицируем участок обработки, распариваем лицо над травяным отваром;
2. Обрабатываем инструмент спиртом;
3. Аккуратно прикладываем иглу к середине прыща или угря, слегка нажимаем;
4. Выдавливаем прыщик петелькой;
5. Обеззараживаем кожу.

Сразу же после завершения основных этапов протрите все лицо новым ватным диском, смоченным в одном из вышеперечисленных дезинфицирующих растворов.

Затем на эпидермис необходимо нанести успокаивающую маску, способствующую закрытию пор. Таким может стать состав из белой глины. Нанесите маску на четверть часа, а затем смойте водой.

Несколько раз сполосните лицо холодной водой, а в завершении протрите кубиком льда. Идеально, если кубик льда будет приготовлен из травяного настоя — календулы, ромашки или чистотела.

Следующие несколько дней лучше не пользоваться никакой декоративной косметикой, чтобы не причинить еще больший стресс эпидермису. Некоторые пользователи этого приспособления отмечают, что после его применения могут оставаться синяки, а сама процедура вызывает боль.

Все это вполне возможно, особенно у обладателей чувствительной и тонкой кожи.

Также стоит помнить, что применять иглу нужно только для крупных угрей и глубоко расположенных прыщей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Так как данные инструменты затрагивают эпидермис, крайне важно перед процедурой убедиться, что для их использования нет никаких противопоказаний:

- Наличие таких кожных заболеваний как дерматит, экзема, псориаз в обостренной стадии;
- Наличие механических повреждений на эпидермисе: ранок, порезов и трещин;
- Наличие крупных родинок, родимых пятен, папиллом и бородавок в обрабатываемой обл.
- Купероз или близкое расположения капилляров под кожей;
- Период беременности и менструации.
- Склонность к образованию келлоидных рубцов;
- Нарушение процесса свертываемости крови;
- Герпес на губах, фурункулез.

Однако, как утверждают специалисты, противопоказания распространяются лишь на полноценную механическую чистку лица. В том случае, если вам необходимо выдавить буквально 1–2 прыщика в зоне, которую не затрагивается одна из вышеперечисленных проблем, воспользоваться инструментами все же можно.



ГАРАНТИЯ 3 МЕСЯЦА!

