

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

ЛАЗЕРНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ФОТОЭПИЛЯТОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Пожалуйста, внимательно прочитайте
инструкцию перед использованием прибора



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРОДУКТЕ

В данном аппарате используется бьюти-технология фотоэпиляции IPL, которая напрямую воздействует на кожу сильным пучком света, чтобы создать фотобиохимический эффект. Это усиливает регенерацию коллагеновых тканей и эластичных волокон кожи, восстанавливает упругость кожи, улучшает микроциркуляцию крови, удаляя и уменьшая морщины. Также мощный пучок света может проникать сквозь кожу и окрашивать ткани. Первым делом он проникает в капилляры. Тепловая энергия сгущает кровь, не разрушая кожные покровы, а пигментированные кластеры разлагаются под воздействием температуры, таким образом, сужая расширенные сосуды, удаляя пятна и ненужные волосы.

ОБЗОР ПРОДУКТА

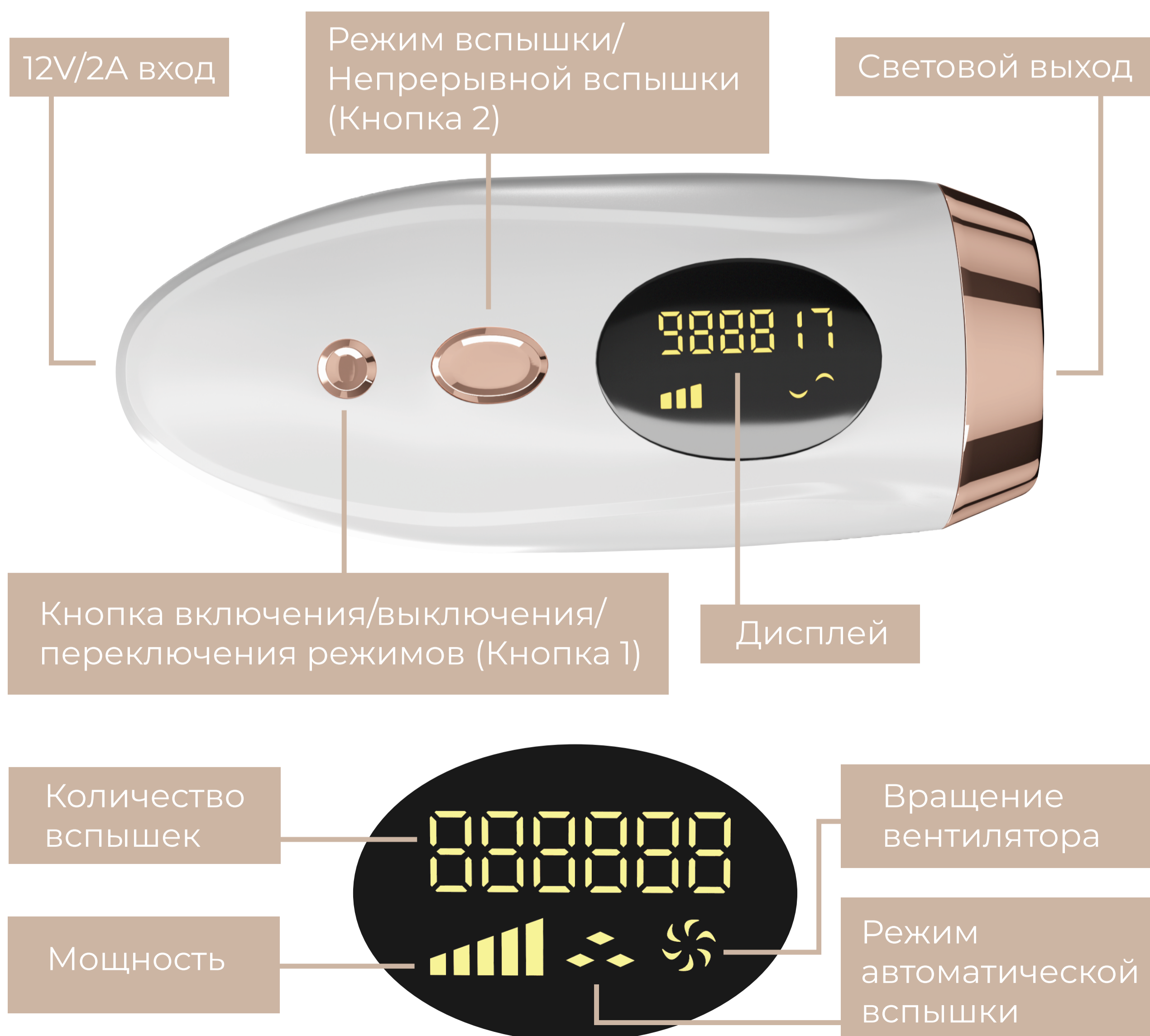

КОЖНЫЙ ТЕСТ

Перед первым использованием прибора, а также после загара, следует провести кожный тест на всех частях тела, которые вы планируете обработать. Это необходимо, чтобы проверить реакцию кожи на воздействие аппарата и понять, какая интенсивность света нужна на каждой из обрабатываемых частей тела.

- 1 Выберите участок кожи, расположенный недалеко от области воздействия
- 2 Включите прибор
- 3 Разместите его на выбранном участке кожи и нажмите кнопку, которая включит излучение
- 4 По окончании кожного теста подождите 24 часа, чтобы узнать, будет ли вызвана какая-либо кожная реакция. Если реакция всё-таки возникла, к сожалению, вам придется выбрать другой прибор, который не будет вызывать кожных реакций и удалит все нежелательные волосы без вреда вашему организму. Очень надеемся, что тест пройдет успешно, и продолжаем знакомить вас с инструкцией.

ВЫБОР РЕЖИМА ПО ОТТЕНКУ КОЖИ

Область применения: волосы над верхней губой, волосы в подмышечных впадинах, на ногах и руках, линия роста волос на лбу и другие волосы. Безболезненное удаление волос возможно для черноволосых и темноволосых людей, не подходит для белых, близких к белому, русых волос. Пожалуйста, воспользуйтесь приведенной ниже контрастной карточкой оттенков волос и кожи:

цвет волос \ цвет кожи	белый	бежевый	светло-коричневый	коричневый	темно-коричневый	черный
белый\серый	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
красный	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
светло-русый	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
темно-русый	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗
коричневый	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗
темно-коричневый	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗
черный	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1** Людям с чувствительной кожей нужно быть аккуратными, рекомендуем проконсультироваться с врачом
- 2** Нельзя использовать прибор при аллергических дерматитах, экземах и других кожных заболеваниях, связанных с аллергией
- 3** Не использовать во время беременности, кормления грудью и менструации
- 4** Если в ближайшие две недели на кожу будет попадать солнечный свет, пользоваться прибором нельзя

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка к использованию:

- 1** Удалите волосы на поверхности кожи, подготовьте ее. Во время бритья используйте специальную пену или гель, чтобы не повредить кожу
- 2** Очистите кожу и убедитесь, что на ней нет волос, что она абсолютно сухая и обезжиренная. Перед использованием фотоэпилятора запрещено наносить косметические продукты, так как это препятствует облучению.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Название: Лазерный омолаживающий фотоэпилятор для удаления волос

Принцип работы: Бьюти-технология фотоомоложения IPL

Стандарт изготовления: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

Входное напряжение: DC 12 Вольт

Длина волны излучения: 570-1100 нм

Модель: TMY-002

Ток: 2 А

Мощность: 36 Вт

Вес: 220 грамм



Примечание: В связи с постоянным выпуском новых версий продукции компания оставляет за собой право менять изображение продукта, пожалуйста, найдите именно ваш продукт

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1** Прежде чем использовать прибор, очистите место, откуда будет идти свет и фильтр прибора, ватным диском или чистой тканью, пропитанной медицинским спиртом (если загрязнений нет, чистить не нужно). Обратите внимание, что это место должно быть сухим перед использованием, иначе свет может попадать на кожу неправильно.
- 2** Включите прибор в розетку, нажмите кнопку включения на 3 секунды, режим включения отобразит количество оставшихся вспышек и уровень мощности, а также значок вращения вентилятора.
- 3** Переключатель мощности также регулирует уровень мощности. Нажмите «Кнопку 1», чтобы выбрать подходящий уровень, первый — самый низкий, пятый — самый высокий, уровень мощности может регулироваться циклически.
- 4** После настройки мощности прибор нужно плотно прижать к области кожи, которую необходимо обработать, и нажать «Кнопку 2», чтобы начать депиляцию.
- 5** Нажмите и удерживайте «Кнопку 2» в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить автоматический режим излучения. На экране загорятся три ромбика — это означает, что автоматический режим излучения включен. Аппарат необходимо приподнимать и ставить на новое место. Если аппарат медленно двигать, не поднимая его, автоматическая депиляция не будет работать. Область удаления волос необходимо проходить трижды при каждой обработке. Вам нужно пройти один раз по интересующей вас области. Затем следует перейти на другое место и чуть позже вернуться на тот же участок, повторив этот цикл еще два раза. Не рекомендовано проходить прибором сразу по одному и тому же месту. Это может вызвать ожог.
- 6** Чтобы выключить фотоэпилятор, нажмите и удерживайте «Кнопку 1» на протяжении 3 секунд для окончания работы. После использования головки светового фильтра на аппарате могут остаться небольшие черные точки — удалите их с помощью спирта. После использования прибора для удаления волос, вы можете нанести гель алоэ вера, чтобы успокоить кожу (по желанию).

ТАБЛИЦА ЦИКЛОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ

1- 4 недели	2-3 раза в неделю	Более 75% волос начнут выпадать естественным образом
5-6 недель	2 раза в неделю	Новые волосы выпадают, их рост замедляется
7-8 недель	Один раз в неделю	Волос становится меньше, они становятся тоньше и перестают расти
Более 8 недель	1-2 раза в неделю	Использовать по мере необходимости, в соответствии со скоростью роста волос (когда появятся новые волосы, можно опять использовать прибор до прекращения их роста)

Удаление волос состоит из трехкратного облучения кожи. После облучения области один раз, сделайте это второй раз, затем третий. Не обрабатывайте три раза подряд одну и ту же точку.

Повышение мощности повышает энергию излучения и усиливает эффект работы прибора. Рекомендуется использовать уровень 1 или 2 в начале работы. После того как кожа привыкнет, можно перейти на уровни 3-5. Интервал между обработками кожи зависит от количества и особенностей волос. На различных частях тела они также могут быть разными.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1** Кожа может немного покраснеть и нагреться, также вы можете ощущать покалывание. Такие реакции безвредны и скоро пройдут.
- 2** Через 2 часа после использования прибора можно использовать лосьон, крем, дезодорант, увлажняющие средства или косметику на обработанных участках кожи без каких-либо опасений. Если кожу покалывает после обработки или она покраснела, подождите, пока это пройдет, и потом применяйте любые продукты. Если после нанесения продукта кожу опять стало покалывать, смойте средство водой.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- 1** Выключите его после использования, выдерните вилку из розетки и дайте прибору остыть
- 2** Намочите ткань небольшим количеством чистой воды и протрите фильтр прибора и те части, которые контактировали с кожей
- 3** Храните прибор в сухом месте при температуре от 0 до 60 градусов, берегите от пыли

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Описание проблемы	Возможная причина	Решение
Прибор/сетевой адаптер нагреваются во время работы	Прибор необходимо заново настроить	Когда защита от перегрева активирована, обдув начинает работать. Пожалуйста, не отключайте питание прибора. Дайте ему охладиться в течение 15 минут, прежде чем продолжить использование
Необычный запах при использовании девайса	Аксессуары фильтра слишком грязные	Никаких действий не требуется
	Вы не удалили полностью волосы с обрабатываемого участка кожи. Эти волосы могут гореть и испускать запах	Пожалуйста, удалите волосы с поверхности кожи перед использованием прибора
Во время курса обработки кожа стала более чувствительной, я чувствую невыносимую боль во время использования прибора	Вы выбрали слишком высокую интенсивность излучения	Пожалуйста, проверьте, какая интенсивность нужна именно вам. Если необходимо, понизьте ее
	Вы не до конца удалили волосы с обрабатываемого участка	Прежде чем использовать прибор, удалите волосы с обрабатываемого участка кожи
	Ультрафиолетовый фильтр или излучатель повреждены	Использование прибора недопустимо
	Вы используете прибор в неподходящей области, или цвет вашей кожи не подходит для обработки данным прибором	Не используйте девайс на сосках, ареолах, малых половых губах, влагалище, анусе, ноздрях и внутри ушей, мужчины не могут использовать прибор на лице и мошонке
Недовольство результатами обработки	Вы используете слишком низкую интенсивность света	В следующий раз выберите подходящие настройки
	Вы пропустили участки кожи между обрабатываемыми областями	Пожалуйста, облучайте участки кожи, максимально близко прилегающие друг к другу
	Девайс неэффективен для вашего цвета кожи	Если оттенок ваших волос — светлый блонд, золотой или рыжий, обработка не будет эффективной. Для успешного удаления волос необходимо следовать инструкции. Можно сократить интервалы между использованием прибора, но не используйте его чаще чем раз в день
	Недостаточное использование прибора может привести к тому, что реакция на IPL-терапию будет медленной	Продолжайте использовать девайс в течение как минимум 6 месяцев, так как за этот период волосы отрастут вновь, но их станет меньше

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1** Не допускайте попадания излучения прибора в глаза. Не смотрите в отверстие, которое испускает свет.
- 2** Легкое покраснение кожи после обработки прибором — это нормально, можно охладить кожу с помощью льда или просто немного подождать.
- 3** При очистке стекла излучателя не распыляйте спирт прямо на него. Нанесите спирт на ватный диск, а затем протрите прибор.
- 4** Во время работы прибора нельзя применять гелеобразные косметические средства, аппарат может испортиться.
- 5** За 3 часа до применения прибора постарайтесь не есть пищу, повышающую светочувствительность (например, шпинат, рапс, горчицу и другие подобные продукты).
- 6** Настройка уровня мощности производится от низкого к высокому. Чем выше мощность, тем интенсивнее эффект. Будьте аккуратны, не повредите кожу.
- 7** Люди с темной кожей могут увидеть результат работы прибора позднее, поэтому повышать мощность нужно с осторожностью.
- 8** Применяйте увлажняющий солнцезащитный крем после использования прибора.
- 9** Избегайте ультрафиолетового излучения во время обработки кожи, защищайте кожу от солнца при выходе на улицу, наносите солнцезащитный крем.
- 10** Во время использования не блокируйте отверстия для выхода воздуха и отверстия для отвода тепла, чтобы не нарушать теплообмен.



ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ



Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную гарантию.

ТЕХПОДДЕРЖКА



По любым техническим вопросам о товаре, можно связаться с нашей техподдержкой. Отсканируйте QR-код.