



**ВАКУУМНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ-МАССАЖЕР**

ИНСТРУКЦИЯ

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ

Этот multifunctional прибор для избавления от черных точек работает на основе неинвазивной технологии вакуумного всасывания под давлением.

3 РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМА всасывания созданы для 3 разных типов кожи, они позволяют удалить глубокие черные точки, лишний жир, акне и кожные загрязнения.

Чтобы удовлетворить всевозможные нужды пользователя, прибор оборудован 6 различными насадками. Они очищают лицо во всех направлениях и бережно подтягивают кожу, делая поры меньше, нормализуя секрецию жира, повышая эластичность кожи и делая ее более чистой и гладкой.



ОСОБЕННОСТИ

3 РЕЖИМА ВСАСЫВАНИЯ:

в соответствии с различными типами кожи, разработаны подходящие режимы всасывания для сухой, жирной и смешанной кожи.

6 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАСАДОК:

чтобы справиться с удалением различных несовершенств кожи, очищением пор и микродермабразией, он оборудован шестью насадками для выполнения разных функций.

LED-ДИСПЛЕЙ,

обладающий высоким разрешением: интуитивно понятный для управления прибор оснащен LED-экраном высокого разрешения, который отображает текущее состояние девайса, делая его использование максимально простым.

ВЫСОКОЕМКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ БАТАРЕЯ:


прибор оборудован полимерной батареей емкостью 380 мА и кабелем зарядки USB. После полной зарядки он способен работать в течение 90 минут.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА:

работая в режиме максимальной интенсивности, девайс производит шум уровнем не более 30 Дб, что отвечает стандартам для сна по рекомендации международной организации по стандартизации (ISO).

ИНТЕРФЕЙС

СМЕННЫЕ НАСАДКИ

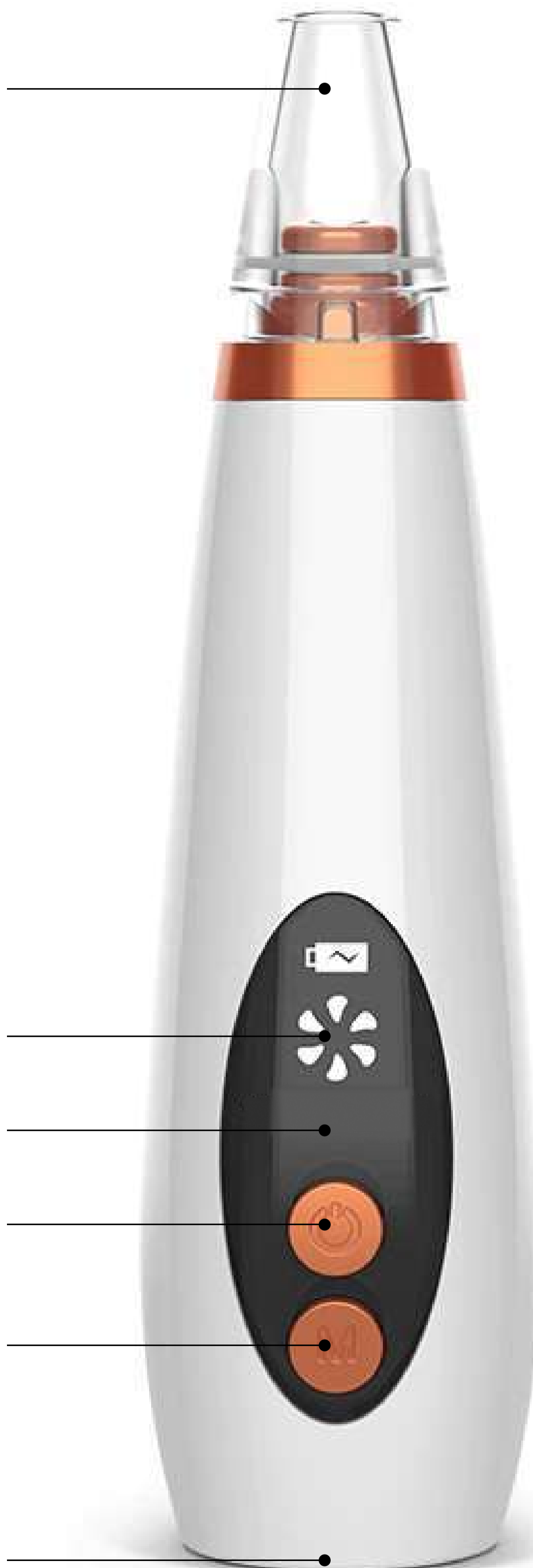

LED - ЭКРАН

ТИП КОЖИ

КНОПКА ПИТАНИЯ

КНОПКА РЕЖИМОВ

ВХОД ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА

6 СМЕННЫХ НАСАДОК



1



2



3



4



5



6

1. **КРУГЛАЯ НАСАДКА-МИНИ** для чувствительной и среднезагрязненной кожи
2. **БОЛЬШАЯ КРУГЛАЯ НАСАДКА** используется для удаления черных точек и подтяжки кожи
3. **КРУГЛАЯ НАСАДКА** подходит для всех типов кожи.
4. **МАЛЕНЬКАЯ КРУГЛАЯ НАСАДКА** подходит для чувствительной кожи, устраняет несовершенства кожи.
5. **ОВАЛЬНАЯ НАСАДКА** используется для уменьшения морщин и повышения эластичности кожи.
6. **КРУГЛАЯ НАСАДКА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА** используется для жирной кожи, вытягивает черные точки и убирает прыщи.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Зарядка: убедитесь, что вы заряжали прибор в течение 6 часов перед использованием. (Красный цвет индикатора означает, что зарядка идет, зеленый – что прибор полностью заряжен)
1. Очищение: убедитесь, что лицо очищено и высушено, прежде чем использовать прибор для удаления несовершенств кожи.
1. Перед использованием: поместите на лицо горячее полотенце на 3-5 минут, чтобы раскрыть поры. Также можно применить распариватель для лица или воспользоваться прибором для удаления несовершенств кожи сразу после ванны.
1. Использование: В зависимости от типа кожи, выберите подходящую насадку и установите ее. Нажмите кнопку включения и выберите уровень интенсивности всасывания (Жирная/Нормальная/Сухая). Обрабатывайте кожу размашистыми движениями длительностью 1-2 секунды.
1. После использования: Вымойте лицо холодной водой сразу после использования. После этого можно приложить к лицу лед или растереть кожу кубиком льда, чтобы сузить поры.
1. Чистка наконечника прибора: тщательно очищайте его после каждого использования, чтобы предотвратить занесение инфекции, и чтобы избежать засорения фильтра. Можно использовать спиртовой раствор с концентрацией спирта не более 70% или мыло и влажную тряпку.

ВАЖНО

* Данный прибор может не подходить для тонкой, чувствительной кожи, или для кожи с расширенными сосудами, поэтому протестируйте его перед первым использованием на предплечье. Если у вас аллергия или повышенная чувствительность к вакуумной обработке, пожалуйста, не используйте прибор.

* При использовании прибора передвигайте всасывающую насадку по коже медленными круговыми или прямыми движениями. Убедитесь, что она не остается на одном и том же участке дольше 2 секунд. В противном случае прибор может повредить вашу кожу и оставить синяк (особенно на чувствительной коже), потому что всасывание происходит с достаточно большой силой.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

? МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ?

Нет, пожалуйста, не используйте прибор во время зарядки.
Это опасно



? ПОЧЕМУ МОЕ ЛИЦО СЛОВНО СГОРЕЛО НА СОЛНЦЕ ИЛИ ОБВЕТРИЛОСЬ?

Применение прибора может вызывать покраснения и ощущение, похожее на обветривание, но они пройдут через пару минут. Не переживайте, это нормально. Ополосните лицо холодной водой, воспользуйтесь лосьоном и увлажняющим кремом. Также вы можете помассировать лицо кубиком льда, чтобы сузить поры и успокоить кожу.

Если чувство жжения или краснота не проходят в течение часа, возможно, вы держали вакуумную насадку в одном и том же месте слишком долго. Пожалуйста, следуйте пошаговой инструкции пользователя и не обрабатывайте прибором один и тот же участок кожи дольше 2 секунд.

? МОЖНО ЛИ ОБРАБАТЫВАТЬ ПРИБОРОМ ВЛАЖНУЮ КОЖУ?

Пожалуйста, не используйте прибор на влажном лице, так как она не позволяет вакууму полноценно воздействовать на кожу и снижает эффект. Также электрические приборы не рекомендуется использовать в сырости.

? МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР ОДНОВРЕМЕННО С ГЕЛЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОЖНЫХ НЕСОВЕРШЕНСТВ И ДРУГИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ?

Да, прежде чем использовать прибор, примените распариватель кожи, горячее полотенце, гель или крем для удаления несовершенств в течение 5 минут, чтобы как следует раскрыть поры. Для лучшего эффекта в случае плохо поддающихся удалению несовершенств рекомендуется использовать одновременно и очищающий гель, и другие инструменты.



ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ!