

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73



ИНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1.Описание товара	3
2.Характеристики	4
3.Эксплуатация	5
Выбор режима работы	5
Как вставить и вынуть насадку	5
Как заполнять бак для воды	6
Как заряжать батарею	7
4.После использования	8
5. Меры безопасности	9
6.Предупреждение	9
7.Обслуживание и чистка	10
8.Устранение неполадок	11
9.Гарантия и сервис	12

ОПИСАНИЕ ТОВАРА



Примечание: в баке может находиться жидкость.
Это дистиллированная вода, оставшаяся после тестов.
Она безопасна для организма.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер устройства	FL-V29
Название устройства	Умный ирригатор для полости рта
Потребляемая мощность	7 Ватт
Объем бака для воды	320 мл
Степень защиты от воды	IPX7
Объем аккумулятора	2000 мА/ч
Вес устройства	298 г

	Режим работы	Обычный	Пульсирующий	Точечный
Давление воды (в PSI)	Обычное	30	30-60	30
	Среднее	70	50-80	70
	Сильное	115	70-115	115

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Выбор режима работы

1.1. При долгом нажатии кнопки "M" режим работы автоматически переключается.

1.2. Нажмите на кнопку "M" для изменения напора воды. Вы можете нажать на кнопку "M" для выбора "обычного", "среднего" или "сильного" напора в каждом режиме работы.

1.3 При выборе режима "POINT" вы можете сами регулировать напор воды единичным нажатием на кнопку включения.

1.4 После переключения с режима "POINT" в режим "NORMAL" вам нужно зажать кнопку включения на пару секунд, чтобы ирригатор продолжил работать.

	Режим работы	Обычный	Пульсирующий	Точечный
Давление воды (в PSI)	Обычное	30	30-60	30
	Среднее	70	50-80	70
	Сильное	115	70-115	115

Обычный режим: используется для обычной чистки рта.

Пульсирующий режим: используется для чистки дёсен.

Точечный режим: используется для межзубной чистки.


2. Как вставить и вынуть насадку.

2.1. Вставьте насадку в специальное отверстие.

2.2. Протолкните насадку до конца.

2.3. Чтобы вынуть насадку, необходимо нажать на кнопку снятия насадки.


3. Как заполнить бак для воды

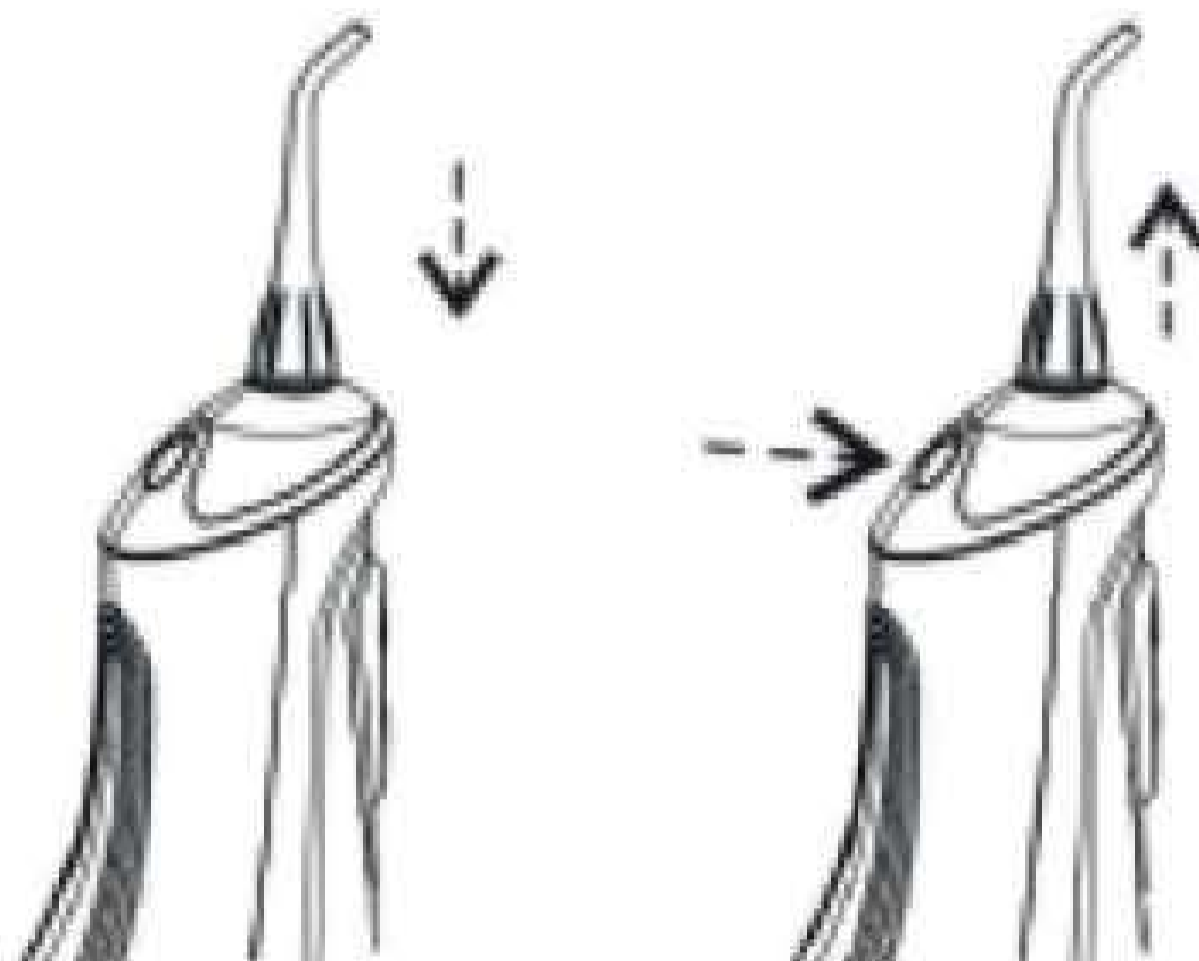

3.1 Сначала откройте крышку бака.

3.2 Залейте воду в бак.

Примечание: Перед тем, как залить воду, убедитесь, что устройство не подключено к сети.

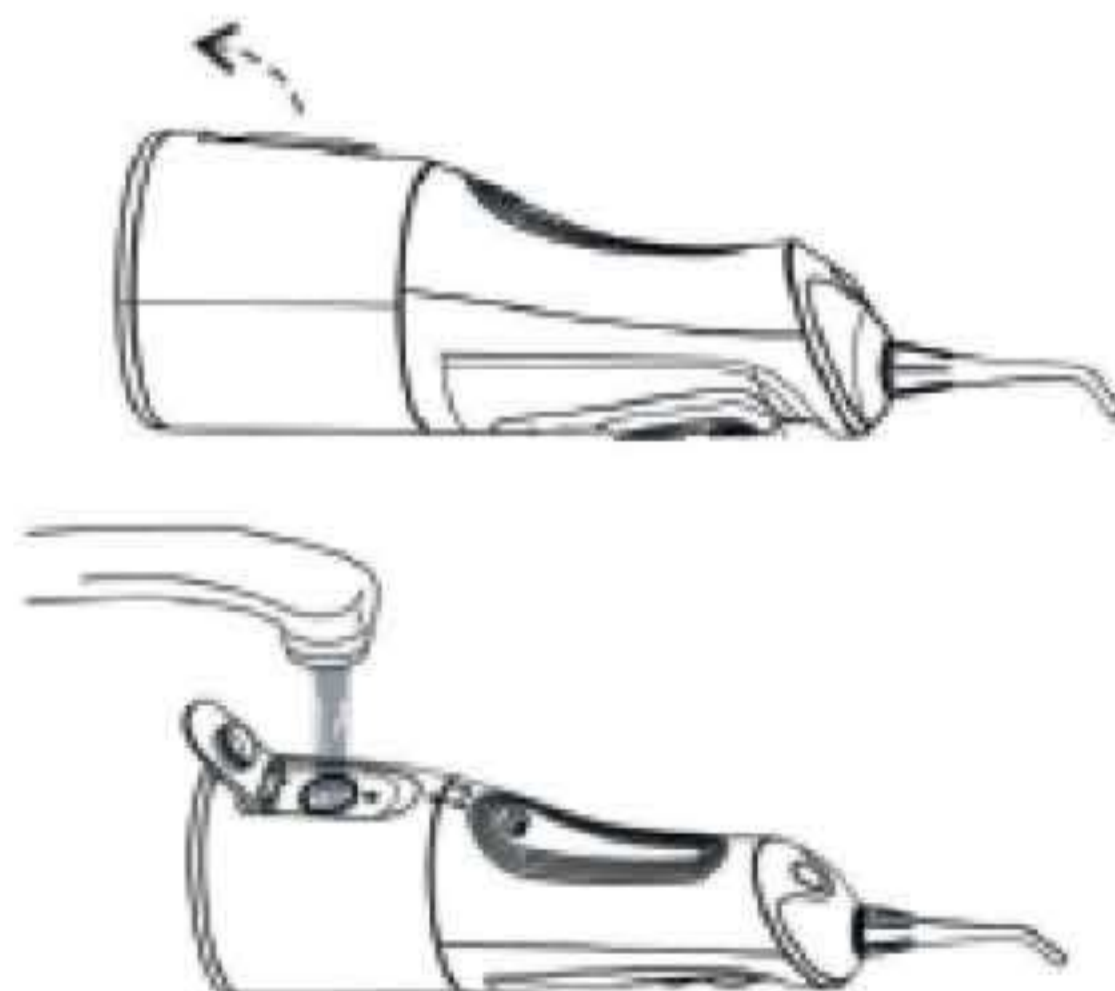


4. Как зарядить батарею

4.1 Перед первым использованием необходимо полностью зарядить батарею. Время полной зарядки - 6 часов.

4.2 При зарядке индикатор медленно мигает синим цветом; После полной зарядки, лампочка перестаёт мигать и светится синим цветом.


Примечание: В комплекте к устройству не идёт адаптер питания. Для зарядки вы можете использовать 5-ти вольтовой DC кабель

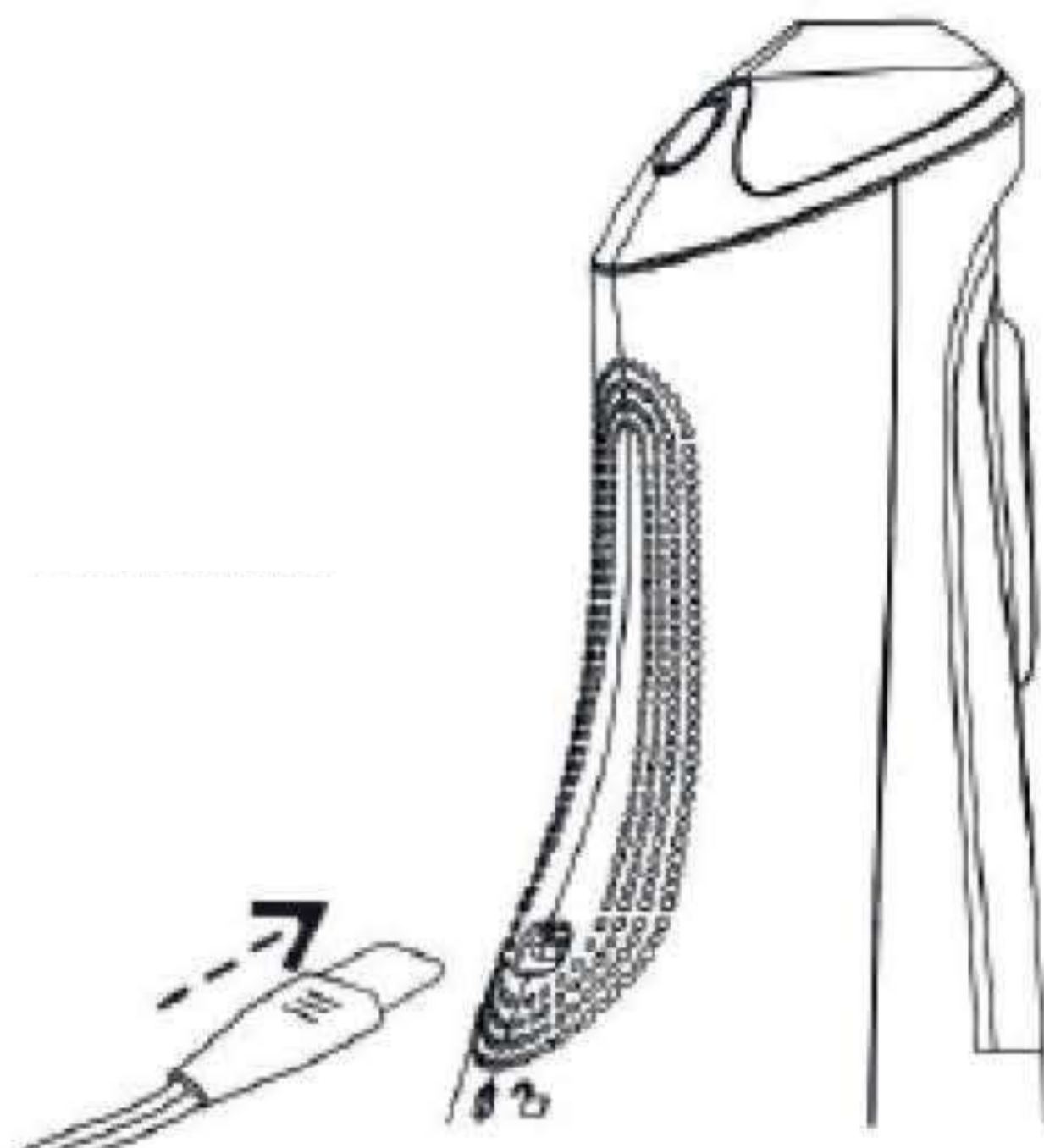

Перед первым использованием заряжайте в течение 6-ти часов.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Во избежание образования бактерий после долгого неиспользования устройства следует промывать бак для воды, выливать остатки жидкости из него, а также включать устройство на 2-5 секунд, чтобы освободить трубку от воды.

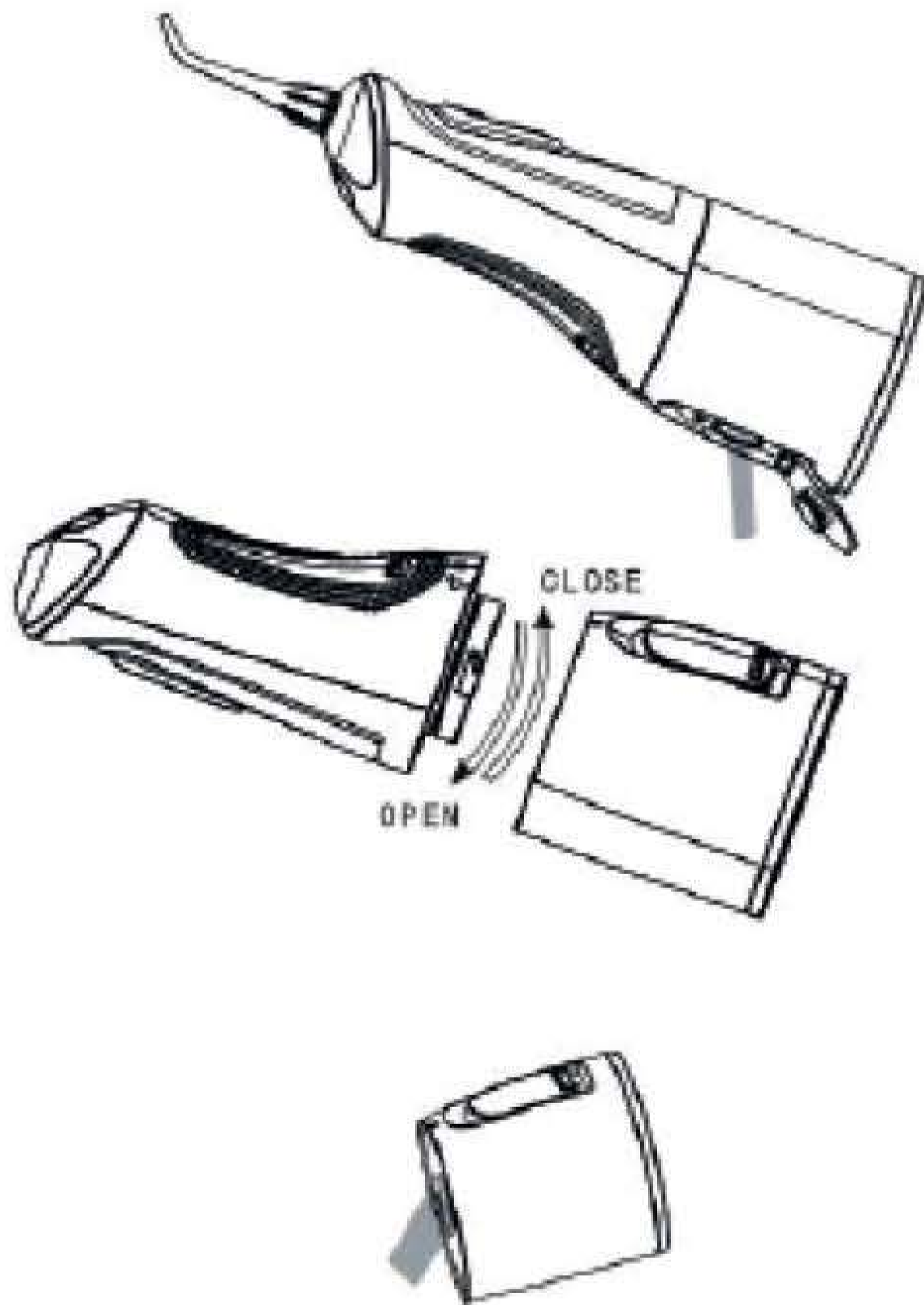

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этот пункт перед использованием устройства и дальнейшей эксплуатацией.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание поражения электрическим током:

Храните устройство и зарядку в защищенном от воды месте;

Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками;

Не погружайте устройство в воду или другую жидкость;

Убедитесь, что шнур от зарядного устройства цел и изолирован;

Не используйте устройство во время купания;

Не храните устройство рядом с ванной, раковиной и т.д.;

Перед подключением убедитесь, что зарядный шнур полностью сухой;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если вы переносили челюстно-лицевую или стоматологическую операцию за последние 2 месяца, то вам необходимо проконсультироваться со стоматологом перед использованием устройства.

Не подключайте устройство в сеть, отличную по системе напряжения, указанной на устройстве или зарядке. Не храните провода рядом с огнем или горячими поверхностями.

Не используйте устройство, если провод повреждён, залит жидкостью или не работает.

Данное устройство не подходит для людей с ограниченными физическими или умственными способностями, а также для людей с недостатком опыта или знаний, например, детям.

Не выливайте использованную воду из бака на язык, в уши, в ноздри или другие чувствительные части тела. Это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Не заливайте в бак воду, теплее чем 40°C (104°F).

Держите в недоступном для детей месте.

Заполняйте бак только водой или другой стоматологической жидкостью (такой как жидкостью для полоскания рта или другим рекомендованным стоматологом средством).

Данное устройство может не подходить людям с перенесённым воспалением зубов или болью в дёснах. Нужна консультация специалиста. Не давите слишком сильно насадкой на зубы или дёсны. Это может вызвать боль в них.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Категорически запрещается погружать устройство в воду. При необходимости вы можете протереть корпус устройства мягкой тканью, пользуясь неабразивным моющим средством. Бак можно промывать как в мыльной воде, так и в посудомоечной машине.

Перед чисткой отключите устройство от сети. Перед тем, как подвергнуть устройство воздействию отрицательных температур, снимите бак и вылейте воду.

7.1 Насадка

Нажмите на кнопку и выньте насадку. Промывайте водой, затем вытирайте сухой тряпкой. Мы рекомендуем менять насадку раз в 6 месяцев, так как её диаметр может увеличиться из-за постоянной работы устройства и других факторов.

7.2 Водонасосная трубка

Промывайте водой, затем вытирайте сухой тряпкой. Не гните трубку, так как это может привести к остановке всасывания воды или другим проблемам.

7.3 Бак для воды

Промывайте водой, затем вытирайте сухой тряпкой. Используйте щётку или губку, чтобы очистить бак от грязи, затем протрите бак изнутри тряпкой.

7.4 Адаптер питания

Протирайте металлическую часть "вилки" сухой тряпкой каждые 6 месяцев.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Вопрос 1: Что делать, если затекла вода в отверстие для насадки?

Ответ 1: Если насадка вставлена не до конца, вытащите её и повторно установите.

Вопрос 2: Каковы причины протекания бака для воды?

Ответ 2: 1.Оставшаяся в баке жидкость. 2.Крышка бака открыта или закрыта неправильно.

Вопрос 3: Недостаточное давление/нет потока воды.

Ответ 3: 1.Устройство перевернуто. Для правильной подачи воды насадка должна быть выше бака. 2.В баке недостаточно воды. Пожалуйста, полностью заполните бак.

Вопрос 4: Устройство невозможно зарядить.

Ответ 4: 1.Основная розетка не находится под напряжением. Включите её.
2.Плохой контакт с USB-кабелем. Выткните и воткните его обратно.

Вопрос 5: Устройство не работает.

Ответ 5: 1.Батарея разряжена. Убедитесь, что розетка находится в исправном состоянии. 2.Крышка бака открыта или закрыта неправильно. 3. Горит значок "PULSE" во время зарядки. Дождитесь, пока он погаснет, устройство снова будет работать.

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия составляет 3 месяца со дня продажи.

Ответ 1: Если насадка вставлена не до конца, вытащите её и повторно установите.

Гарантия не распространяется на батарею, упаковку и любые повреждения, вызванные неправильным использованием устройства.

Сохраните чек в качестве документа, подтверждающего дату продажи.

Обратитесь в ближайший сервисный центр за помощью.