

# ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

---

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



# ВВЕДЕНИЕ

Прибор для ультразвуковой чистки **Honey Care** отвечает за комплексный базовый уход за кожей в домашних условиях.

Благодаря повышенной частоте ультразвука (24 КГц) происходит глубокое очищение кожи на клеточном уровне.

Ультразвуковая чистка помогает избавиться от комедонов, черных точек, воспалений, загрязнений и ороговевших клеток кожи.

Также она способствует устранению отеков, неглубоких морщин, неровного цвета лица и дряблости кожи.

Волновые колебания улучшают кровообращение, удваивают эффект от косметологических процедур.

Прибор изготовлен из качественных материалов, он компактный и легкий, что позволяет взять его с собой в путешествие.

Для достижения видимого эффекта прибор рекомендуется использовать регулярно.



# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно изучите данную инструкцию перед эксплуатацией прибора.

Прибор предназначен только для личного использования.

- 1** Не разбирайте прибор и не пытайтесь выполнять какие-либо другие процедуры, не указанные в нашей инструкции.
- 2** Не оставляйте прибор без присмотра в месте, доступном детям.
- 3** Не промывайте прибор под струей воды, так как это может вызвать внутренние повреждения.
- 4** Не рекомендуется проводить процедуру в ваннных комнатах и бассейнах.
- 5** Прибор следует хранить вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.
- 6** Не вскрывайте корпус прибора. В случае неполадок обратитесь в техническую поддержку.
- 7** Используйте прибор только с гелем или сывороткой. Во время процедуры кожа должна быть увлажнена.
- 8** Если при использовании прибора вы почувствовали боль или дискомфорт, немедленно прекратите его использование.
- 9** Не пользуйтесь прибором вблизи легковоспламеняющихся веществ (этиловый спирт, бензин, жидкость для снятия лака, спрей и т.д.)
- 10** Если прибор повредился при падении или ударе, прекратите его использование.

# УХОД ЗА ПРИБОРОМ

После процедуры обязательно выключите прибор.

Удалите остатки косметологических средств ватным диском.

Чтобы исключить накопление жира и других загрязнений на лопатке, протрите прибор раствором хлоргексидина.



# ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Беременность и кормление
- Любые виды аритмии
- Заболевания крови
- Онкология
- Наличие электрокардиостимулятора
- Повреждение кожных покровов в области лица и шеи
- Дерматиты и дерматозы, аллергическая реакция
- Воспалительные процессы, обострения акне
- Заболевания лицевого нерва
- Наличие имплантов
- Психические расстройства
- Острые вирусные заболевания, грипп

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Лопатка должна соприкасаться с кожей под углом 45°.

Не останавливайтесь на одном и том же участке кожи. Медленно проводите лопаткой по поверхности лица.

Перед первым использованием прибор необходимо зарядить. Индикатор будет гореть красным цветом в первые пару минут после подключения к зарядному устройству, затем погаснет. Обычно процесс зарядки занимает около 3 часов.

Перед проведением процедуры необходимо очистить кожу от макияжа и загрязнений.

Для достижения наилучшего эффекта выполните скрабирование кожи.

Нанесите на кожу гель/сыворотку на водной основе предназначенную для ультразвуковых процедур. Гель является идеальным проводником ультразвуковых волн. С помощью него лопатка лучше скользит по коже и не травмирует ее.


Проводите процедуру поступательными движениями по массажным линиям.



# СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## Очищающий лифтинг


- 1 Очистите кожу лица и нанесите гель или крем.
- 2 Лопатка прибора расположена наружу и направлена вниз. Слегка надавливайте на лопатку для эффективного очищения пор.
- 3 Удалите остатки средства с кожи ватным диском.

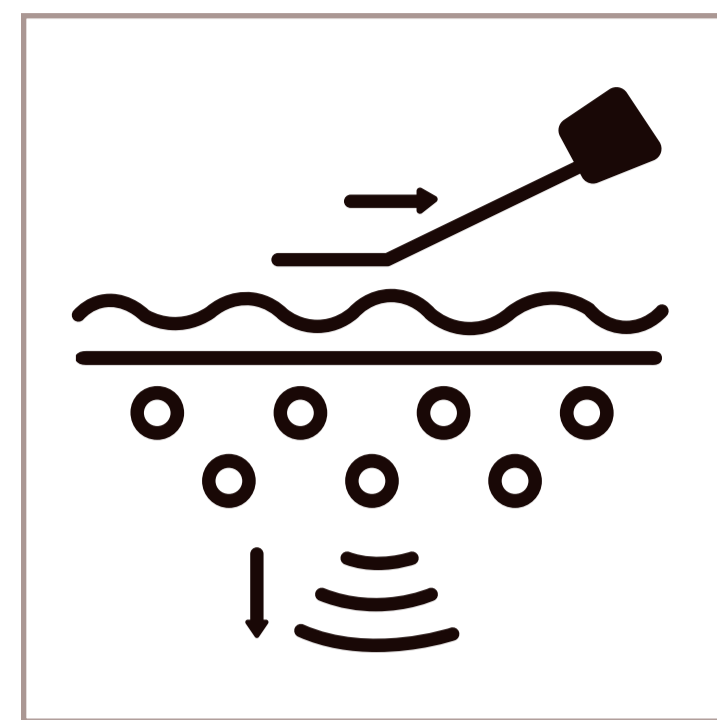

Время сеанса: 5-10 минут (1-3 раза в неделю).

## Ультразвуковой пилинг


- 1 Очистите кожу лица и нанесите тонер или лосьон на 10 минут.
- 2 Лопатка прибора расположена внутрь и направлена вниз. Медленно перемещайте её по поверхности кожи.
- 3 Умойтесь теплой водой после завершения процедуры.

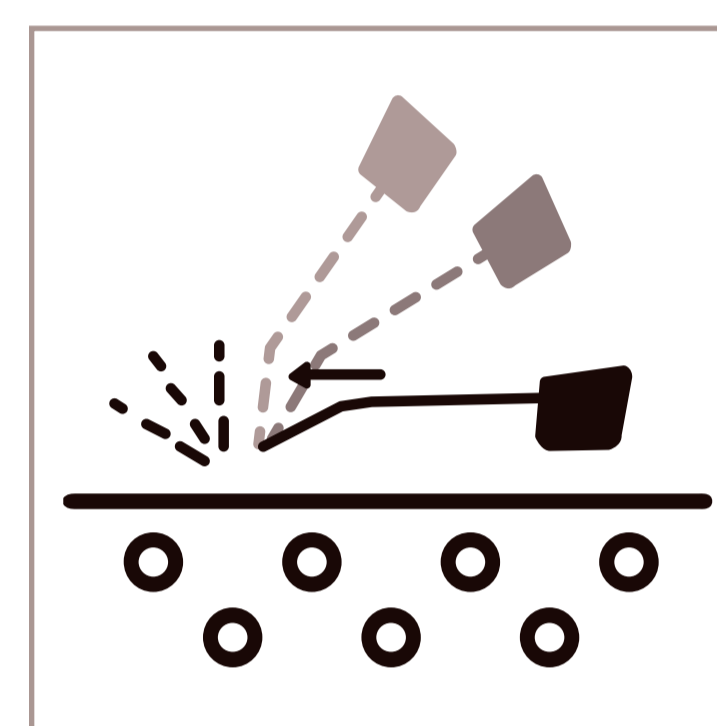

Время сеанса: 5-10 минут.

## Холодное гидрирование


- 1 Очистите кожу лица и нанесите гель или маску с экстрактом алоэ для открытия пор.
- 2 Оберните лицо пищевой пленкой на 10-15 минут.
- 3 Лопатка прибора расположена внутрь и направлена вниз. Медленно перемещайте лопатку по поверхности кожи. Не задерживайтесь длительное время на одном участке кожи.
- 4 После процедуры умойтесь теплой водой.

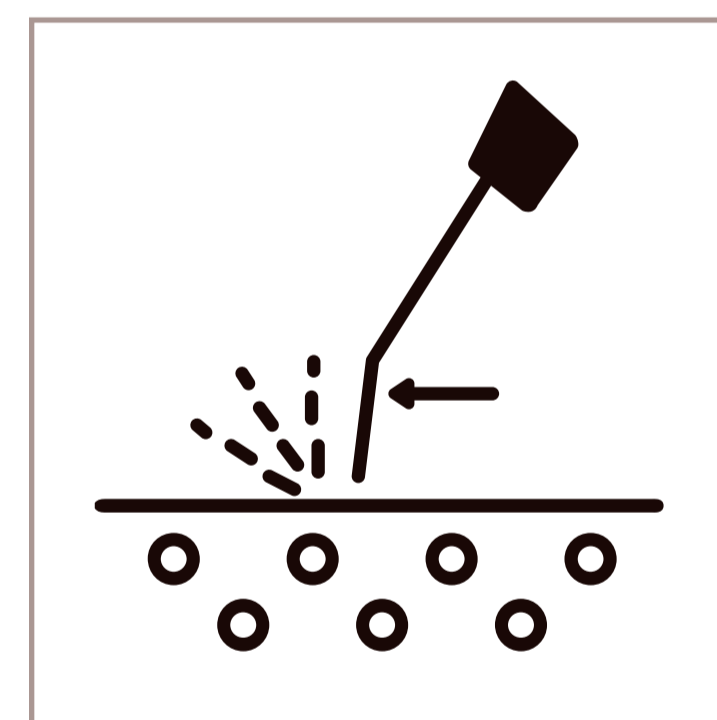

Время сеанса: 5-10 минут.

## Питание и массаж кожи

- 1 Очистите кожу лица и нанесите увлажняющий тоник/крем.
- 2 Переверните прибор обратной стороной.
- 3 Обратная сторона лопатки должна соприкоснуться с кожей под углом в 45°. Медленно перемещайте лопатку, для глубокого проникновения уходовых средств.

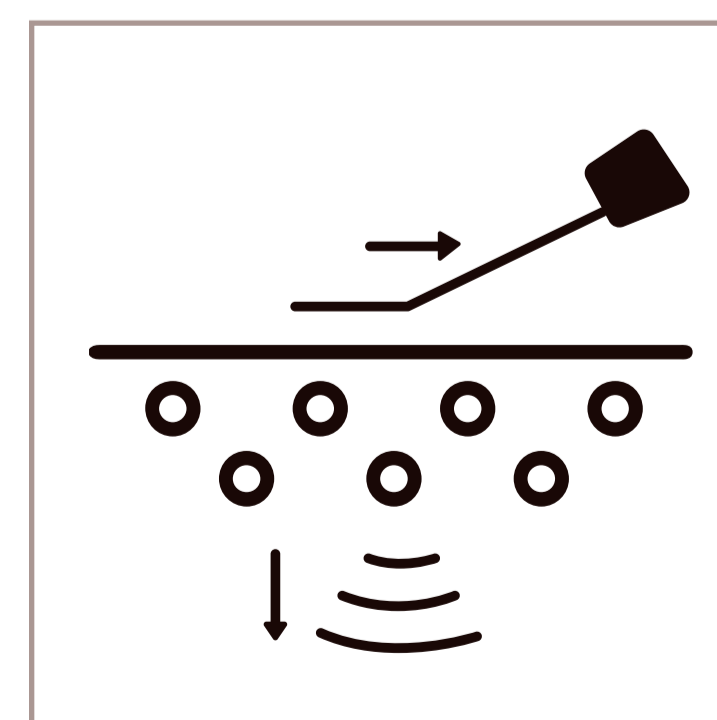

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

## Микромассаж

С помощью ультразвуковых волн образуются микровибрации, стимулирующие дерму. Это помогает убрать тонус напряженных мышц, расслабляет их.

При регулярном применении выравнивается тон лица.

## Фонофорез

Ультразвуковые волны помогают косметологическим средствам проникать глубоко в клетки кожи, тем самым удваивая эффективность процедур.

## Дезинкрустация

Под действием отрицательно заряженного электрода происходит размягчение жировых пробок, раскрываются поры.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Батарея:** 3.7В

**Емкость батареи:** 350 мА·ч

**Входное напряжение:** 5В/1А

**Мощность:** 3 Вт

**Вес:** 80 грамм

**Размер прибора:** 70 x 45 x 135 мм

**Размер упаковки:** 76 x 35,5 x 190,5 мм

**Частота:** 24 КГц

# ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ